

ノータッチで サッと消毒!

「アルサット」は手をかざすだけでアルコールが
噴射される **自動** 手指消毒器

Alsat
AL10 自動手指消毒器「アルサット」

ボトルに触れず
衛生的

専用液不要
市販液で OK

赤外線センサーで
自動噴射



定価 4,743 円 (税別)

待合室に・・・



診療室内に・・・



＜アルサット 新発売記念 キャンペーン＞

新発売を記念して、アルサット本体と
手指消毒剤 AL をキャンペーン**特別価格**にて
提供させていただきます。

限定!
500セット

手指消毒剤 AL (¥2,800) + アルサット AL10 (¥4,743)
¥7,543 を新発売を記念して

特別価格 5,000 円 (税別)

★数に限りがあるため、なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承下さい。



医薬部外品
手指消毒剤 AL 1L
定価 ¥2,800 (税別)



自動手指消毒器
「アルサット」AL10
定価 ¥4,743 (税別)

商品の 特長は裏面へ ➡

食中毒の流行や新型インフルエンザに対する予防として多くの施設等で入室時のアルコール消毒が習慣化されています。



仕様

商品名	自動手指消毒器「アルサット」
品番	AL10
価格	定価 ¥4,743 (税別)
本体色	ホワイト
寸法	約172(W)×163(D)×304(H)mm (補助板除く)
質量	約750g (消毒液・電池除く)
材質	ABS樹脂
タンク容量	350ml
電源	単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間	お買い上げから1年間
セット内容	アルサット本体・背板・底板・受け皿・補助板・専用鍵×2個・壁取り付け用ねじ×2本・樹脂製プラグ(アンカー)×2個・取扱説明書 ※単3形アルカリ乾電池×4本・薬液は別売です。
JANコード	4971660767991

ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本製品は液体アルコールタイプの消毒液専用です。ジェルタイプの消毒液には使用しないでください。
- 本製品は電子部品を使用した精密機械です。取扱いにご注意ください。
- アルコール使用につき火気は絶対に近づけないでください。
- 乾電池やアルコール消毒液が入ったまま直射日光の強い所や炎天下の車内など高温の場所に放置しないでください。
- 落下にご注意ください。
- 本製品の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.

安全に関するご注意 正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

●このパンフレットの内容は2011年6月現在のものです。●製品の見直しなどのため、仕様、価格、デザインその他は予告なく変更する場合があります。●製品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

赤外線センサーで自動噴射！

かざした手を感知して消毒液を自動噴射します。本体に触れずに手指消毒が可能で衛生的です。



お手もとの消毒液の利用が可能！

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。

※ジェルタイプの消毒液は使用できません。




消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたづらを防止します。

消毒液の補充のしかた



①専用鍵を差し込み、矢印の方向に回してロックを解除する。

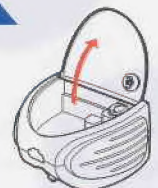

②フタを開ける。



③消毒液を入れる。(350ml)

※フタを閉める場合は、①～②の逆の手順で行ってください。

場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本(別売)で動くので、設置場所を選びません。また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。



据置きで



壁付けで

販売元：



KING JIM 株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

フリーダイヤル(全国共通) 0120-79-8107 FAX 0120-79-8102
お客様相談室

電話受付時間：平日(月曜日～金曜日)午前9時～午後5時30分 www.kingjim.co.jp

携帯電話をご使用の場合は、下記をご利用ください。
0570-06-4759 (通話料お客様負担)

発売元：



サンデンタル株式会社

本社：〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 TEL (06) 6245-0950 FAX (06) 6245-7690
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目12番1号 TEL (03) 3836-9347 FAX (03) 3836-2090
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 TEL (092) 482-2318 FAX (092) 482-2339